11-90-001



Veloped kävelykepin pidike: kokoamisohje


Veloped-rollaattorin 2-osainen keppiteline, joka toimii myös turvahihnana, kun Veloped on kokoon taitettu kuljetusta tai säilytystä varten. Keppiteline sopii kaikkiin Veloped-malleihin.

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi tai laitteellasi nähdäksesi video-ohjeet.



1 Kiinnitä takapidike.

Kiedo takapidike rungon pystysuoran takaputken yläosan ympärille heti korkeussäätö- ja pikavapautuskytkimen alapuolelle.

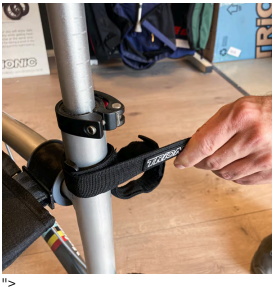

2 Kiristä hihna vetämällä.

Kiristä hihna tiukalle, kiedo se putken ympärille ja kiinnitä se tarranauhalla. Hihnan loppuosa saa roikkua vapaasti.

">



3 Säädä takasilmukka.

Takasilmukan kokoa voi säätää tarranauhaa löysäämällä. Pyöreän muodon saavuttamiseksi saatat joutua puristamaan silmukkaa kevyesti.



4 Kiinnitä etupidike.

Kiedo etupidike ylemmän runkoputken ympärille heti koripidikkeen taakse. Varmista, että hihnan luistonesto on käännetty runkoputkea kohti.



5 Säädä etulenkki.

Etusilmukan kokoa voi säätää tarranauhaa löysäämällä. Pyöreän muodon saavuttamiseksi saatat joutua puristamaan silmukkaa kevyesti.



6 Kiinnitä kävelykeppi.

Kiinnitä kävelykeppi työntämällä se ensin taka- ja sitten etusilmukan läpi.



7 Kiinnitä kehys.

Kävelykepin pidikkeen hihnaa voi käyttää kokoon taitetun rungon turvahihnana Velopedin kuljetuksen ja säilytyksen aikana.