11-90-023



TRIONIC

Kiitos, että valitsit 1600 lumenin Trionic LED -etuvalojen akkupakkauksella.

Tässä käyttöohjeessa näytetään sekä valopidikkeen ja valon kiinnittäminen Walker-laitteeseen (vasen sarake alla) että niiden kiinnittäminen Velopediin (oikea sarake alla).

Vasemmanpuoleisessa kuvassa **A** näyttää Walkerin pidikkeen kiinnitysosat (2 ruuvia + 2 aluslevyä). **B** näyttää Velopedin pidikkeen kiinnitysosat (1 ruuvi + 1 pyälletty mutteri + 1 mutteri).

Valonpitimen kiinnittäminen

Ohjeet kävelytuelle




A1. Paikanna mustan puolipystysuoran putken päältä kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät kahvaputken jarruvivun edessä.



A2. Löysää molemmat ruuvit LED-valon mukana toimitetulla 5 mm:n kuusiokoloavaimella.



A3. Irrota kaksi ruuvia kahvan kiinnikkeestä.

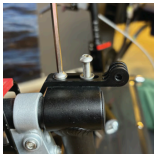

A4. Aseta valonpidin kiinnityspuristimeen siten, että sen pyöreä ja uritettu valonkiinnike osoittaa eteenpäin ja ylöspäin. Kiinnitä kaksi ruuvia aluslevyineen kiinnittimen reikiin.



A5. Kiristä kaksi ruuvia 5 mm:n kuusiokoloavaimella. HUOMAUTUS: On tärkeää kiristää ruuvit kunnolla, koska ne kiinnittävät kahvan putken kumikahvan ja jarruvivun kanssa.

Ohjeet Velopedin käyttöön



B1. Paikanna ruuvi Velopedin U-muotoisen kahvan keskimmäisestä taittosaranasta. Irrota ruuvi mukana toimitetulla 4 mm:n kuusiokoloavaimella.



B2. Vaihda vanha ruuvi LED-valon mukana tulevaan pidempään ruuviin. Kiinnitä pidempi ruuvi saranaan ja kiristä se 4 mm:n kuusiokoloavaimella.



B3. Kiinnitä valonpitimen lyhyt, kulmikas pää ruuvin alaosaan U-muotoisen tartuntatangon alapuolelle. Pitimen tulee osoittaa alaspäin. Kiinnitä pidike yhdellä aluslevyllä ja pyälletyllä mutterilla, jotka kiristät sormillasi.



B4. Jotta pidike kiinnittyisi paremmin ja estäisit pidikkeen tahattoman kääntymisen sivulle, vaihda uritettu mutteri mukana tulevaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun mutteriin ja kiristä se 10 mm:n kiintoavaimella.



B5. Tässä kuvassa lampun pidike näkyy oikein kiinnitettynä.

11-90-023

LED-valon kiinnittäminen pidikkeeseen

Ohjeet kävelytuelle



A6. Tunnista valonpitimen pyöreä etupää, jossa on kaksi uraa valon kiinnittämistä varten.



A7. Työnnä valon uritettu kiinnike pidikkeen uriin ja varmista, että ne ovat kohdakkain. Katsottuna Walkerin kulkusuunnassa, aseta mukana tuleva siipimutteri vasemmalta paikalleen ja kiristä se.

Ohjeet Velopedin käyttöön



B6. Paikanna ruuvi Velopedin U-muotoisen kahvan keskimmäisestä taittosaranasta. Irrota ruuvi mukana toimitetulla 4 mm:n kuusiokoloavaimella.



B7. Tunnista valonpitimen pyöreä etupää, jossa on kaksi uraa valon kiinnittämistä varten.

Akun asettaminen paikalleen

Ohjeet kävelytuelle



A8. Pujota pidempi jatkokaapeli Walkerin puolipystysuoraa kahvaputkea pitkin ja kiinnitä se mukana toimitetulla tarranauhalla.



A9. Voit leikata tarranauhan ylimääräisen pituuden saksilla.



A10. Aseta akku korin vetoketjulliseen takataskuun.

Ohjeet Velopedin käyttöön



B8. Pujota pidempi jatkokaapeli Velopedin U-muotoista kahvaa pitkin ja kiinnitä se mukana tulevalla tarranauhalla.




B9. Voit leikata tarranauhan ylimääräisen pituuden saksilla.




B10. Aseta akku korin vetoketjulliseen takataskuun.


Pakkaus sisältää

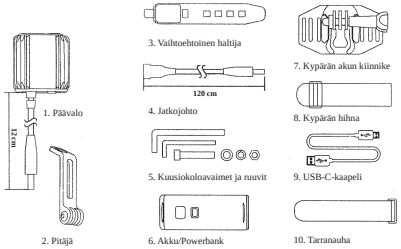

Valon käyttöohjeet

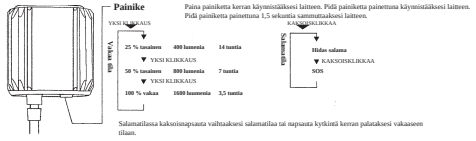

Huomio: Valo on erityisesti suunniteltu toimimaan 5–12 V tasajännitteellä. Kun tulojännite on alle 6,5 V, valon virran merkkivalo muuttuu punaiseksi. Tämä tarkoittaa, että akun varaus on heikko ja se on ladattava.

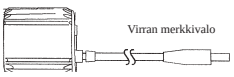

Virran merkkivalo

Jännite > 6,5 V: Vihreä
Jännite < 6,5 V: Punainen