Käyttöohje: Pullopidikkeen kokoaminen Walker 12er -pyörään, koko S



1 Pullonpitimen kokoamispaikka (O tai L).



2 Kiedo hihna runkoputken ympärille ja vedä se pidikkeen läpi.



3 Vedä hihna tiukalle ja kiristä hihna kääntämällä mutteria myötäpäivään.




4 Leikkaa ylimääräinen hihna pois.



(5) Kiinnitä toinen pidike samalla tavalla.



(6) Kaksi pidikettä on koottu oikein runkoputkeen.

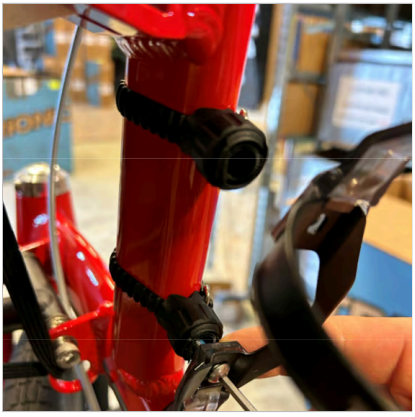

(7) Kiinnitä pullonpidike kahdella ruuvilla. Pullonpidikkeen "aukon" tulee osoittaa ulospäin.



(8) Pullonpidike on nyt kiinnitetty runkoon ja pullo asetetaan sisään sivulta ja poistetaan ulospäin.