Käyttöohje: Trionic Walkerin selkänojan hihnan vaihto




1 Irrota hihnaa kiinnittävä ruuvi 3 mm:n kuusiokoloavaimella.

Toista vastakkaisella puolella.



2 Varmista, että saat ruuvin, mutterin ja putkimaisen välikappaleen talteen.

.

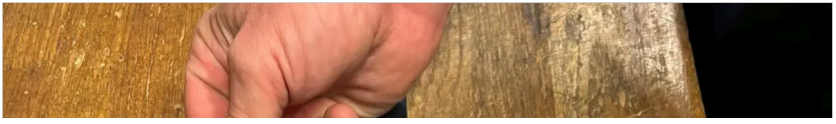

Käyttöohje: Trionic Walkerin selkänojan hihnan vaihto



5 Aseta uusi vaihtohihna pehmusteeseen.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että kohdistat hihnan pään TRIONIC-logoon kuvassa näkyvällä tavalla.



6 Aseta putkimainen välikappale hihnan päässä olevaan reikään.

.

